




Bettkantensensor bucinator

Darstellung:

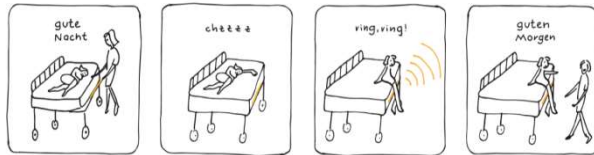

Funktionsbeschreibung:

Der bucinator Bettkantensensor wird so an die Bettkante unter die Matratze geschoben, dass der Patient bei seinem Bettausstieg das Druckelement auslöst. So erfolgt eine Alarmierung per Funk bereits, bevor der Patient das Bett überhaupt verlässt. Mit dem Inkontinenzschutz vor Nässe geschützt, verschwindet der bucinator Bettkantensensor unsichtbar unter dem Spannleintuch.

Einsatzgebiet:

- Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen
- Demenzabteilungen, Kurzzeitpflege,
- Übergangs- und Langzeitpflege
- Krankenhäuser und Kliniken
- Psychiatrische Einrichtungen
- Betreute Wohneinrichtungen für Senioren
- Häusliche Pflege

Kundennutzen:

Erhöhte Sicherheit

Verbesserung der Kunden-/ Patientensituation durch frühzeitige Hilfestellung

Freiräume erhalten/schaffen

Sicherheit und Komfortgewinn für Patienten/ Bewohner bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit dank Funktechnik

Praxispersonal entlasten

Minimierung der Kontroll- und Beaufsichtigungsgänge

Wirtschaftlichkeit steigern durch hochwertiges Produkt

Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Qualität

Kosten vermindern

keine baulichen Maßnahmen erforderlich

Hauptmerkmale:

Frühzeitige Meldung an das Pflegepersonal bevor der Bewohner / Patient die Füße auf dem Boden hat

Kein unbeabsichtigtes Rufauslösen durch Besucher, Reinigungs- oder Pflegepersonal
Einfachste Installation

Installation & Service:

Der bucinator Bettkantensensor wird einsatzbereit mit integrierter Batterie geliefert. Es muss Vorort nur noch in den entsprechenden Empfänger eingelernt werden und passt zu allen Pflegebetten.

Produktvarianten:

30124: bucinator Bettkantensensor

Fragen von Kunden:

Ist der bucinator Bettkantensensor ein Medizinprodukt?

Nein. Beim PROVINOXX Bettkantensensor handelt es sich um ein Peripherieprodukt, welches keinen direkten Personenkontakt hat.

Kann der bucinator Bettkantensensor auch an Rufanlagen angeschlossen werden?

Ja, mit einem an ihre Rufanlage angepassten Funkempfänger, welchen wir Ihnen gerne fertigen können. Nutzen Sie dazu unser Rufanlagen Formular auf unserer Homepage

Verkaufsargumente:

einfache und flexible Montage (Plug and Play)
sofort einsetzbar
einfach und intuitiv bedienbar

Explorer GmbH:

Die Explorer GmbH – Ihr Spezialist für kabellose Assistenzsysteme für Heime und Einrichtungen und Krankenhäuser.

Wir liefern ausgewählte Easywave Funkprodukte namhafter Hersteller, die den Anspruch einer einfachen Bedienung und einer hohen Alltagstauglichkeit erfüllen.

Empfohlene Funkempfänger:

Steckdosen Funkgong RCP24:

Der **Steckdosen-Funkgong RCP24** meldet den Empfang eines eingelernten Funkrufes durch ein optisches und akustisches Signal. Für die Alarmierung stehen unterschiedliche Melodien und Tonlautstärken zur Verfügung. Es können insgesamt bis zu 32 Rufsender eingelernt werden.



Pager Call Easy:

Der Pager **Call Easy** ist ein akkubetriebener Pager, der bis zu 32 Funksender (Easywave) anzeigen kann, die direkt im Pager eingelernt werden. Wird ein eingelernter Sender erkannt, so erfolgt eine Signalisierung durch Vibration und Textanzeige im gut lesbaren Display. Die Anzeigetexte können über eine PC-Bediensoftware angepasst werden.



Rufanlagenadapter:

Der Rufanlagenadapter ist ein Funkempfänger, der von uns angepasst an ihre bestehende Rufanlage, insgesamt bis zu 32 Funksender in ihre Rufanlage melden kann. Über einen entsprechenden Y-Adapter können der bisherige Birntaster und unsere Funksender auch parallel betrieben werden.

Zur Anpassung an ihre Rufanlage hilft Ihnen ein Klärungsbogen, der auf unserer Homepage zum Download bereitsteht.

